




**INSTALLATION**

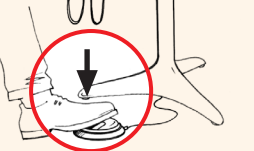


Check you have air and water from your unit 4 hole tubing

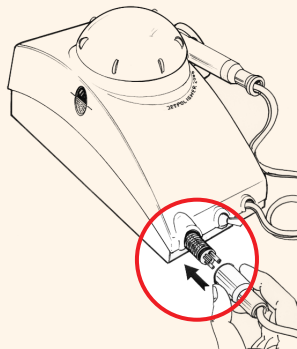

Connect your 4-hole tubing to Polisher connector

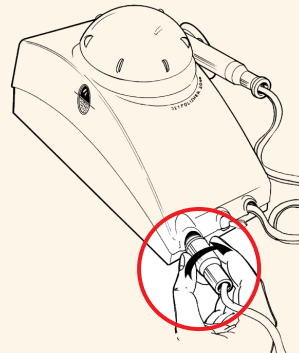




screw up tight to prevent leakage

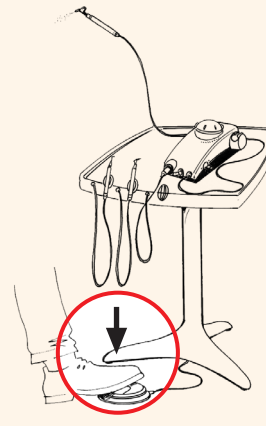


Your foot control will now activate the Polisher

**ADDING POWDER**

Remember ! Do not add above fill line

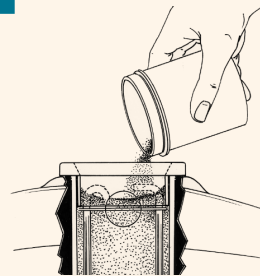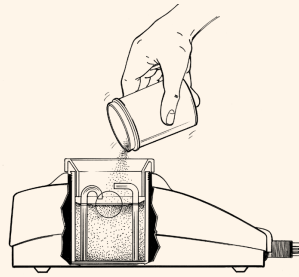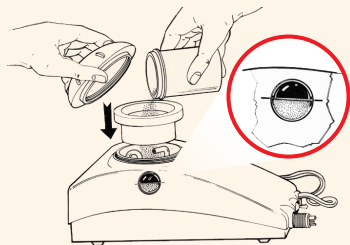

Over filling will cause clogging

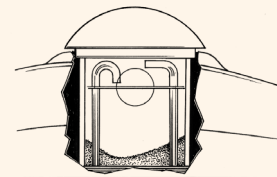


Less powder = less intense cleaning

**ADJUSTING THE CONTROLS**

Use the fingertip test to achieve correct powder/water ratio



Start at the lowest end and gradually build water intensity. Inadequate water will produce a spluttering, intermittent stream. Use only enough water for a steady stream.

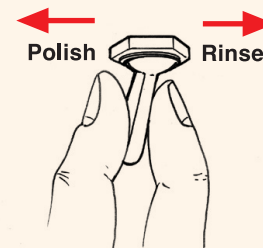

Rinse/Polish mode selector  
Polish = water + air + powder  
Rinse = water + air only

**CORRECT ADJUSTMENT 'FINGERTIP' TEST**


1. In the 'polishing mode', open the water control knob (H<sub>2</sub>O) fully.
2. Hold nozzle approximately 1 cm (3/8") from the finger tip.
3. Activate unit, and gradually reduce the amount of water in the stream by means of the water control knob.
4. A point will be reached when a spot of powder begins to collect on the fingertip. At this point inadequate water is present in the stream.
5. Increase the water flow until the spot of powder on the fingertip just disappears.



**TROUBLE SHOOTING**

**Unblocking a handpiece**


1. Disconnect handpiece

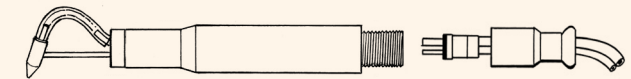

2. Depress foot pedal and check flow from handpiece connector



3. Clean components in ultrasonic bath in warm water or mild vinegar solution

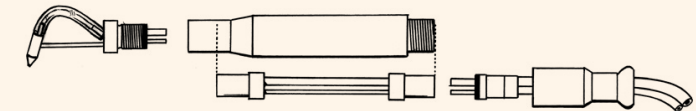


4. Dry thoroughly



**Warning:**  
Always use a dry air supply. Drain water filter on your compressor daily.


**REPLACING SPRAY HEAD TUBING**

Avoid sharp bends in tubing

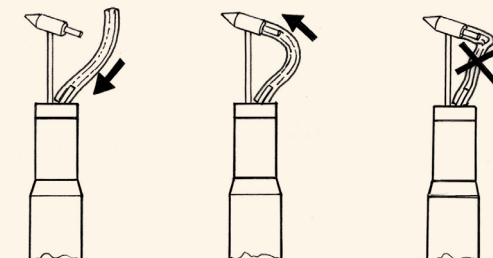

**AUTOCLAVING HANDPIECE**


Always autoclave disassembled

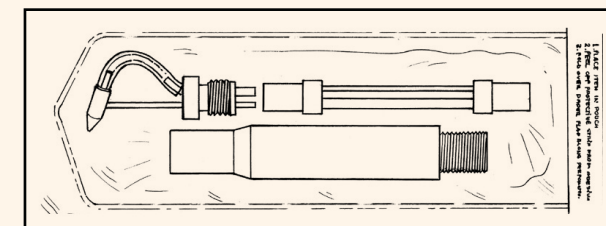


19 Keren Kayemet St. 49372 Petach Tikva, Israel  
Tel: 972-3-9049668 Fax: 972-3-9049681  
e-mail: info@deldent.com www.deldent.com

# Важно: сохраните эту карту для справки и внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед использованием прибора


## УСТАНОВКА

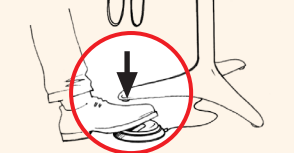


Проверьте наличие воздуха и воды в коннекторе с 4 отверстиями на шланге вашего рабочего места.

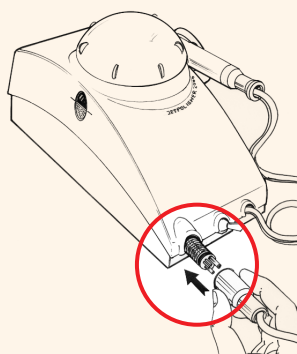

Соедините этот коннектор с коннектором Джетполишера

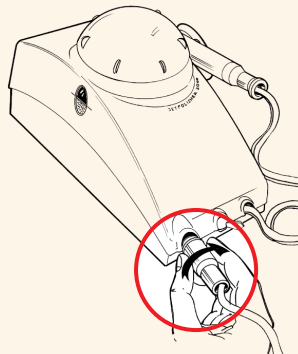




Плотно затяните гайку коннектора по резьбе, чтобы предотвратить утечки воздуха и воды.

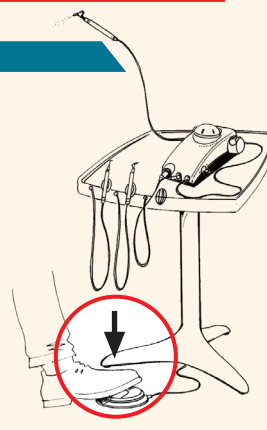


Нажатие на педаль вашего рабочего места приводит Джетполишер в действие.

## ДОБАВЛЕНИЕ ПОРОШКА

Помните! Не насыпайте порошок выше красной индикаторной линии!

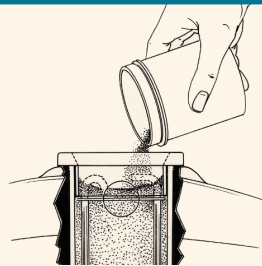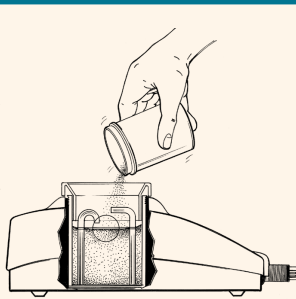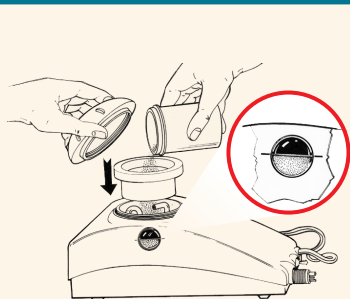

Переполнение стакана приводит к закупорке системы прибора.

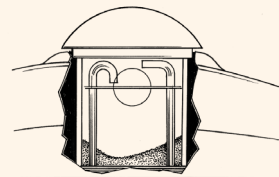


Если порошка мало, интенсивность чистки уменьшается.

## НАСТРОЙКА УПРАВЛЕНИЯ ПРИБОРОМ

Используйте «проверку на пальце» («фингертп тест») для получения правильного соотношения порошка и воды в потоке



Начните с нижнего уровня и постепенно получите нужный поток воды. Недостаточное количество воды создаёт брызгающий, прерывистый поток. Излишнее количество воды приводит к неэффективной работе прибора и повышенному распылению вокруг рабочего места. Используйте только достаточное количество воды для постоянства потока.

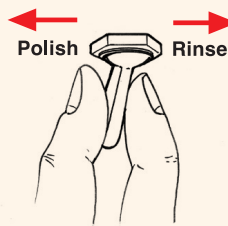

Селектор режима «ПОЛОСКАНИЕ / ПОЛИРОВКА»  
 Полировка = вода + воздух + порошок  
 Полоскание = вода + воздух только

## ПРАВИЛЬНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ «ПРОВЕРКИ НА ПАЛЬЦЕ»


1. В режиме ПОЛИРОВКА откройте регулятор воды полностью.
2. Установите носик распыляющей головки рабочего инструмента (хендписа) прибора на расстоянии примерно 1 см от подушечки пальца.
3. Нажмите на педаль и постепенно уменьшайте количество воды в потоке с помощью регулятора воды.
4. Нужная точка регулировки достигается в тот момент, когда на подушечке пальца начинает образовываться пятно порошка. Оно означает, что в потоке недостаточно воды.
5. Слегка увеличьте поток воды так, чтобы пятно порошка исчезло.



## ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗАКУПОРКЕ РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА (ХЕНДПИСА)

### Unblocking a handpiece


1. Отсоедините хендпис.

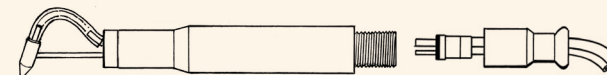

2. Нажмите на педаль и проверьте наличие потока из коннектора хендписа.



3. Прочистите все детали хендписа в ультразвуковой ванне с теплой водой или со слабым раствором уксуса.

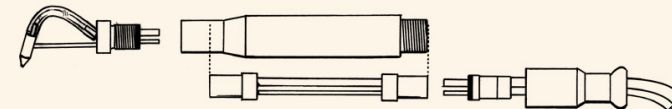


4. Тщательно просушите все детали.



**ВНИМАНИЕ!** Всегда используйте источник сухого сжатого воздуха. Ополосните водяной фильтр вашего компрессора ежедневно. Помните, что влажный воздух является главной причиной закупорки прибора.


## ЗАМЕНА ТРУБОЧКИ В РАСПЫЛЯЮЩЕЙ ГОЛОВКЕ

Избегайте резких изгибов трубочки.

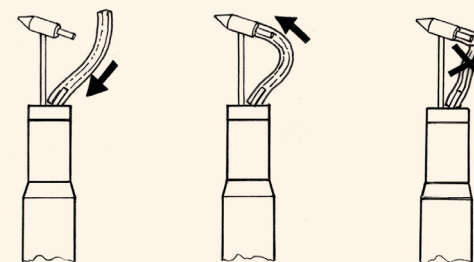

## СТЕРИЛИЗАЦИЯ ХЕНДПИСА

Всегда помещайте хендпис в автоклав в разобранном виде.

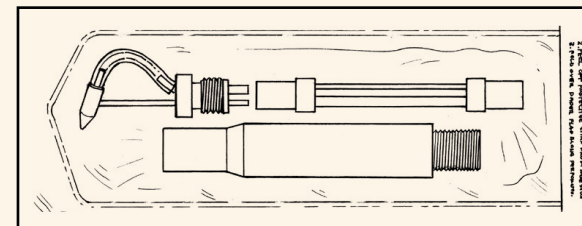

**DEL DENT** Ltd.  
 Petach Tikva, Israel

19 Keren Kayemet St. 49372 Petach Tikva, Israel

Tel: 972-3-9049668 Fax: 972-3-9049681

e-mail: info@deldent.com www.deldent.com